

RECORTADORA DE MUÑONES TAG 86


REF: 000711-IZ

DESCRIPCIÓN

TAG 86 está diseñada para efectuar cortes de modelos de yeso con absoluta precisión y máxima seguridad para el operario durante el trabajo. Todos los mandos funcionan a baja tensión y están protegidos contra el polvo y la humedad.

La superficie magnética garantiza una excelente estabilidad a la base y portamodelos, el cual es posible inclinar y bloquear en cualquier posición.

El disco diamantado, dotado de muescas, diámetro de 80 mm y grosor de 0,25 mm, permite obtener un acabado lateral perfecto con un corte de anchura mínima, además de permitir una considerable profundidad de corte. En la parte trasera de la máquina existe una conexión para equipo de aspiración.

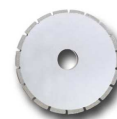

DISCO DE DIAMANTE Ø 80 mm x 0,25 mm
REF: 001873-IZ

INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	420 mm
ANCHO	340 mm
FONDO	200 mm
POTENCIA	60 w
R.P.M.	2.800 rpm
TENSIÓN	230V 50 Hz
PESO	10 kg



PORTAMODELOS
T220
Opcional



PORTAMODELOS
T240
Opcional



PORTAMODELOS
T230
Opcional